

USER MANUAL

Backrest

Product code: JMC-C 7000




1. Characteristics

The backrest is made of a powder-coated steel frame. It features a base with a ratchet system and a back support made of air-permeable linen material, along with an additional pillow for enhanced comfort while lying down. The backrest can be adjusted to meet the individual needs of the patient thanks to the ratchet mechanism.

Elements of the backrest:

- A. ratchet system
- B. backrest
- C. pillow

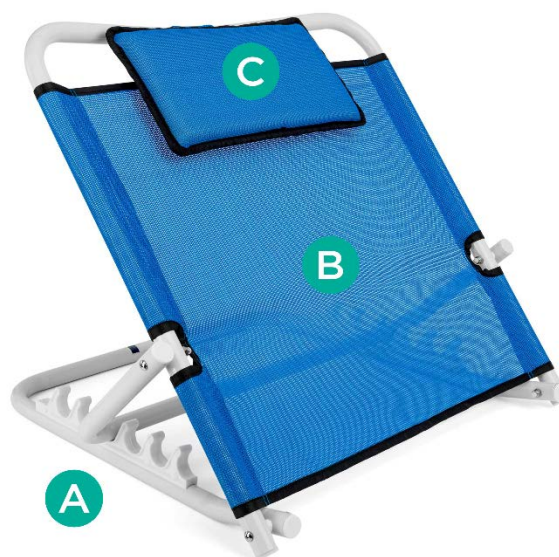

2. Application

Backrest is ancillary equipment designed for patients with reduced mobility and who are in lying position permanently which prevents or hinders the unassisted performance of daily living activities. Back rest helps to maintain half-sitting position without having to be hold by the other person. It is also used in order to tilt the patient to erect position by gradually accustoming the cardiovascular system to sitting position. The backrest is recommended for use at home and in hospitals.

3. Adjustment

Backrest can be adjusted within the range of 25-27 cm.

4. Technical data

Overall width	54,5 cm
Inner width	50 cm
Overall depth	50 cm

Inclination angle adjustment	25-57 cm
Weight	2,7 kg
Maximum capacity	100 kg
Frame colour	white

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Cleaning and maintenance

Reviews

Make visual inspection of all the joining elements (clamps, hinges) of the back rest at least once every three months including:

- condition of ratchet mechanism
- stability and look of the frame

Cleaning

Control the technical condition of the back rest regularly:

- Clean the frame using only water and mild detergents. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing agents and detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).

7. Storage and transport conditions








The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
---	------------------	---	--------------

	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka pod plecy

Kod produktu: JMC-C 7000



1. Wykonanie

Podpórka pod plecy wykonana jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Składa się z podstawy ze skokową regulacją położenia oraz oparcia wykonanego z wytrzymałego i przewiewnego płótna z dodatkową poduszką pod głowę, która podnosi komfort leżenia. Skokowa regulacja kąta nachylenia pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb pacjenta podczas leżenia lub siedzenia.

Elementy podpórki pod plecy:

- A. skokowa regulacja położenia
- B. oparcie
- C. poduszka pod głowę



2. Zastosowanie

Podpórka pod plecy jest sprzętem pomocniczym przeznaczonym dla osób trwale przebywających w pozycji leżącej z obniżoną sprawnością ruchową, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Podparcie umożliwia utrzymanie pozycji półsiedzącej bez konieczności podtrzymywania przez drugą osobę. Podpórka wykorzystywana jest również w celu pionizacji poprzez stopniowe przyzwyczajanie układu krążenia do osiągnięcia pozycji siedzącej. Podpórka polecana jest do stosowania w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Regulacja

Podpórka skokowo regulowana pod kątem w zakresie 25-57 cm.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	54,5 cm
---------------------	---------

Szerokość wewnętrzna	50 cm
Głębokość całkowita	50 cm
Regulacja kąta nachylenia	25-57 cm
Waga	2,7 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Kolor ramy	biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Przeglądy

Należy regularnie wykonywać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatraskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym:

- sprawdzić działanie mechanizmu skokowej regulacji
- sprawdzić stabilność i wygląd ramy nośnej

Czyszczenie

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego podpórki pod plecy:

- Podpórkę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).

7. Warunki przechowywania i transportu










Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono

produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025 (IV)